


FAMILON PRO

FAMILON PRO MEDIFLEX SAFE -HYGIENIAPATJA SL1

Läpäisee liekki- ja savuketestin

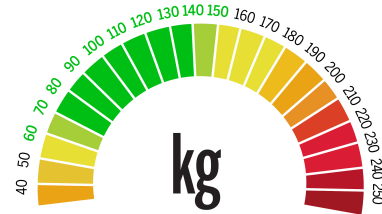

Familon Pro Mediflex Safe -hygieniapatja soveltuu 60-150 kg painaville



TEKNINEN NIMI

MEDIFLEX PATJA

MATERIAALI

Päällinen
kahteen suuntaan joustavaa, paloturvallista, polyuretaanipinnoitettua patjakangasta (52% polyamidi, 48% polyuretaani), jossa antibakteerinen Sanitized®-käsittely, aktiivinen ainesosa sinkkipyritioni (EU528/2012)

Täyte
paloturvallista, joustavaa polyuretaanivaahtopehmustetta

TUOTETIEDOT

PALOTURVALLISUUS

SL1, läpäisee liekki- ja savuketestin, IMO 2010 FTPC Part 9

OMINAISUUDET

Erikoisprofiloitu Familon Pro Mediflex Safe -hygieniapatja sairaan- tai kotihoidon potilaille. Mediflex Safe -patja on tarkoitettu henkilöille, jotka painavat 60-150kg. Patja on käyttökelpoinen myös näiden painorajojen ulkopuolella, mutta mikäli patja on jatkuvassa käytössä huomattavasti painavammalla henkilöllä, voi patjan käyttöikä lyhentyä. Mediflex-patja soveltuu parhaiten matalan- ja keskiriskin potilaille. Patja on kaksipuolinen ja se toimii erinomaisesti säädettävissä sängyissä muotoileikatur sisuksensa ansiosta.

RAKENNE

Hygieniapatjan sisusmateriaalina on paloturvallinen, joustava vaahtomuovi. Päällismateriaali on kahteen suuntaan joustavaa antibakteerista Sanitized®-käsiteltyä hygieniakangasta, joka on pyyhittävää, nesteitä läpäisemätöntä ja hengittävää (52% polyamidi, 48% polyuretaani), väri harmaa. Aktiivinen ainesosa on sinkkipyritioni (EU528/2012). Päällisessä on L-vetoketju päädyssä ja pitkällä sivulla, vetoketju on suojattu tippaläpällä.

HOITO-OHJE

Patjalle tulleet eritteet on puhdistettava mahdollisimman nopeasti. Suosittelemme patjan tuulettamista silloin tällöin, jotta mahdollinen kosteus pääsee vapaasti haihtumaan. Sisuksen pesemistä ei suositella, sillä pesuaineet saattavat vahingoittaa vaahtomuovia ja liuottaa mahdollisen pehmusteiden yhdistämiseen käytetyn liiman. Myös tuotteen todellinen kuivuminen voi kestää kauan. Hygieniakankaasta on valmistettu ns. tippaläpällinen, vetoketjullinen päällinen, jonka saa irrotettua pesua varten. Päällinen kestää vesipesun 70°C (- jopa 95°C tarvittaessa). Älä käytä huuhteluaineita polyuretaanipintaisen kankaan pesussa. Konepesua varten käännä päällinen nurja puoli ulospäin. Rumpukuivaus on tehtävä alennetussa lämpötilassa (poistoilman lämpötila max. 50°C). Pintapuhdistus

FAMILON
UNTEN MAILTA